

フットマッサージャー


形名：TF170

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

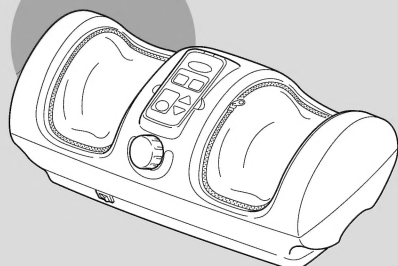

も く じ



安全上のご注意 1～4
各部のなまえと
はたらき 5



使いかた 6～7




お手入れのしかた 8



故障かな?と思ったら 9



仕様 9
アフターサービスについて 10
保証書 裏表紙

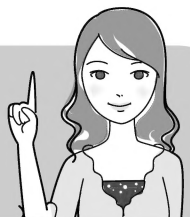

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



禁止

次の人は使用しない。

- 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓症（血束・重度の動脈瘤（りゅう）・急性静脈瘤（りゅう）・各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症をふくむ）など



必ず守る

マッサージは1回15分以内とする。続けてお使いになる場合は、30分以上あけて使う。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となる恐れがあります。



ぬれ手禁止

体がぬれたままの状態では、絶対に使わない。

感電・故障の恐れがあります。



必ず守る

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 治療部位に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状（けん怠感・悪寒・血圧変動など）の強い時期・衰弱している時
- 骨粗しょう症の人、せきついの骨折・急性疼（とう）痛性疾患の人
- 捻挫、肉ばなれなど炎症性疾患の人
- その他医療機関で治療中の人

体調不良・けがをする恐れがあります。

使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談する。

警告



水場禁止

本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしない。また湿気の多い所（浴室など）で使わない。保管しない。

感電・故障の恐れがあります。




禁止

電源コードが破損する恐れのあるような使いかたをしない。

感電・ショート・発火の恐れがあります。

交流100V以外では使わない。また、たこ足配線はしない。

漏電・火災の恐れがあります。

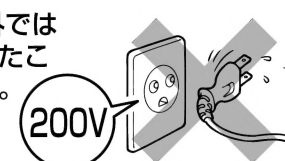

子どもに使わせたり、本体の上で遊ばせたり、座ったりさせない。


事故・けがをする恐れがあります。



分解禁止

本製品の改造・分解・修理は絶対にしない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

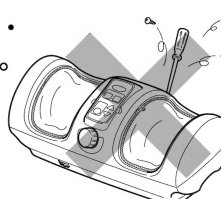

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。


発火する恐れがあります。

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をする。

ほこりが付着したまま使用すると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の恐れがあります。

電源プラグの抜き差しは、必ず電源スイッチを切ってからおこなう。


けが・感電の恐れがあります。

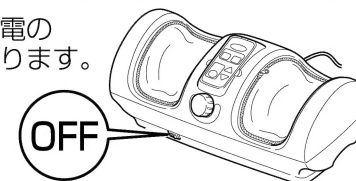

電源プラグを抜く


使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

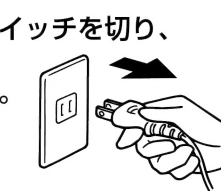


ローラーとケースのすき間に手や足を入れない。

事故やけがをする恐れがあります。

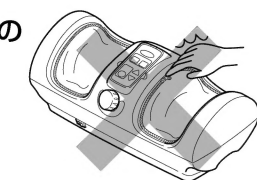

クッションカバー（外面・内面）が破れた状態や、外しては使わない。内部構造が露出した状態では絶対に使わない。

布地が破れた状態で使用すると、けがや故障または重大な事故の恐れがあります。

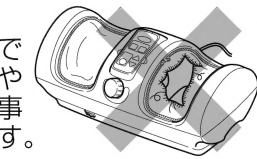

他の治療器との併用はしない。

けが・体調不良・事故の恐れがあります。

足部・ふくらはぎ部以外使わない。頭部、首、胸部、腹部、骨部（ひざ・足の甲・ひじなど）や関節部などへは使わない。

気分が悪くなったり、事故やけがをする恐れがあります。



⚠ 注意



必ず守る

使用中に頭痛を感じたり、具合が悪くなったり、身体に異常を感じたらすぐに使用を中止する。

体調不良・けがをする恐れがあります。

本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使う。

火災・感電・けがの恐れがあります。

本製品を使用する前には、電源スイッチ・操作パネルが正常に作動するか確認する。


火災・感電の恐れがあります。

使用中停電になった時は、直ちに電源スイッチを切る。

火災・感電の恐れがあります。

持ち運ぶ時は必ず
取っ手を持つ。

けがをする
恐れがあります。

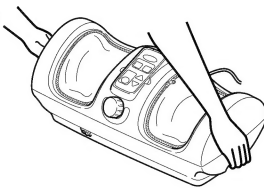

キャスター付きイス・回転イスなどに
すわって使わない。

けがをする恐れがあります。



電源プラグ
を抜く

ご使用にならない時は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。

漏電・火災や感電の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜いてから行う。

火災・感電の恐れがあります。

コンセントから抜く時は、必ず
電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。
感電の恐れがあります。



禁止

食後すぐに使わない。
けが・体調不良の恐れがあります。

電源コードの上に重い物を載せたり、
落としたり、コード類を本体の下敷き
または足にコード類をはさまない。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードを無理に折り曲げたり、
継ぎ足したりしない。

火災の恐れがあります。


本製品に衝撃を
与えたり、
落下させない。

誤動作や故障の
原因になります。



電源コードが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるい時
には使わない。

感電・ショート・
発火の原因に
なります。

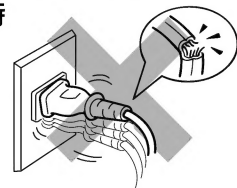

動作中の各部に故意に力を加えて
無理やり止めない。

故障・けがをする恐れがあります。

動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

⚠ 注意




禁止

本体の近くで携帯電話を使わない。
誤動作をする恐れがあります。


テレビ・ラジオなどのAV機器の近くで
使わない。

雑音が入る
恐れがあります。

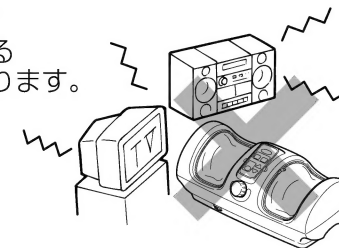

ストーブの近く・電気毛布の中・ふとん
の中・コタツの中・
ホットカーペットの
上などで使わない。

やけど・火災の
恐れがあります。

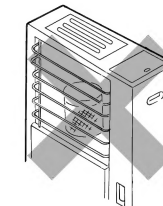

本製品は一般家庭用なので、業務用とし
て使わない。


ねじれが戻らなく
なった電源コードは
危険なため、
使わない。



禁止

電源プラグはコンセント
に確実に差し込み、
たこ足配線はしない。

ショートの恐れが
あります。

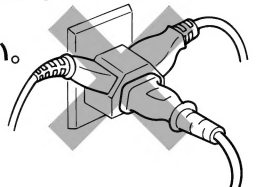

本製品を踏み台にしたり、重い物を載せない。
けがをする恐れがあります。

可燃物や火気の近くでは使わない。

変形・故障・発火する恐れがあります。

機械油などの油成分が浮遊している場所
および化学薬品などの成分が浮遊している
場所では使わない。

変形・故障・発火する恐れがあります。

ベンジンやシンナーで拭いたり、
殺虫剤などを本体にかけない。

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

自分で意思表示のできない人や、身体の
不自由な人には使わせない。


体調不良・けがをする恐れがあります。

ご 注 意


- 使用前に、必ずクッションカバーの布地が破れていないか確認してください。
- 使用前・使用中にクッションカバーの破れなど、本製品に異常が見られた場合、ただちに使用を中止して電源を切り、弊社お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 本製品をしばらく使用せず、再度使用する時は、必ずすべての機能が正しく動作することを確認してからお使いください。(5ページ参照) 異常があった場合は、販売店にご相談ください。
- 使用中に異臭・異常な高温・煙を出したり・その他通常と異なる変化が認められた場合、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。



各部のなまえとはたらき

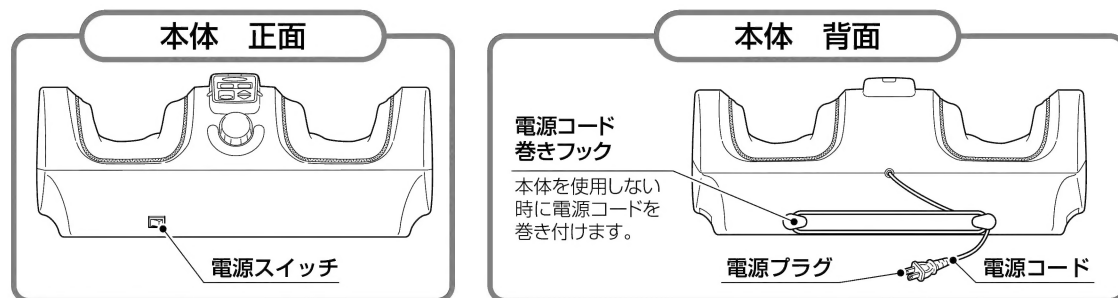


クッションカバー
取り外して洗濯できます。
(8ページ参照)

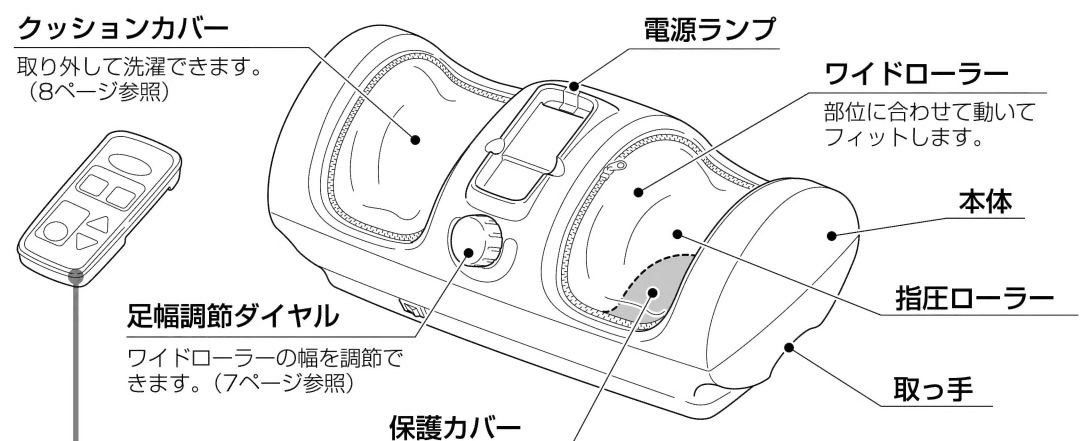

ワイヤレスリモコン (操作パネル)

保管する時はリモコンを本体
に取り付けておきます。
また、本体に取り付けたまま
でも操作できます。

ワイヤレス
リモコン

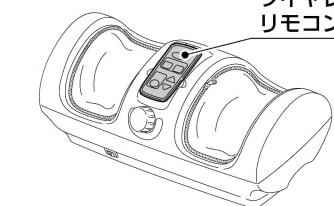


ご使用前に単4形乾電池2個
(付属)を入れてください。



- 電池は必ず指定のものをご使用ください。
- 電池を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

各コースの使いかたは7ページを参照してください。
各スイッチのランプはモード確認のため、約1分間
点灯して消えます。

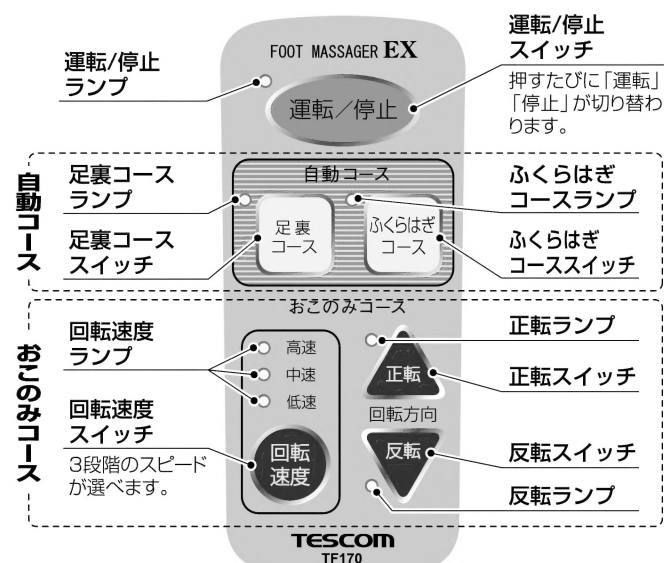

使いかた

基本的な使いかた

- 1 本体を安定した場所に
置き、電源プラグを
コンセントに
差し込む。
- 2 電源スイッチを入れる。
●電源ランプ点灯後「ピー」と
音が鳴り、ローラーが位置調
整をして停止します。
- 3 マッサージしたい部位を
ローラーの間に入れる。
●最も効果が高いの
は右図の ■ 部分
になります。お好
みで部位を動かして
ください。
- 4 運転/停止スイッチを押す。
●正転・低速で運転が始まります。
●運転を止めたい場合は、もう一度押します。
●再び押すと運転します。
●運転/停止スイッチを押した
後、約15分後にタイマーが
働いて運転が自動停止します。
●お好みで「自動コース」、「お
このみコース」を選べます。
(7ページ参照)
- 5 足幅が合わない場合は、足幅調節ダイヤルで
ワイドローラーの幅を調節します。
(7ページ参照)
●バネで動くのは足にフィッ
トさせるための構造です。
故障ではありません。
- 6 電源スイッチを切る。
- 7 電源プラグをコンセントから抜く。

使用例


足裏と足側面

イスにすわり、足をローラー
の間に入れます。
ツボが集中する足裏を刺激するこ
とで血行を促進し、疲労を回復さ
せます。




足首からふくらはぎ

床にすわった状態で、足首を
ローラーの間に入れます。
足首からふくらはぎをマッサージ
して筋肉の痛み・
だるさをもみ
ほぐします。

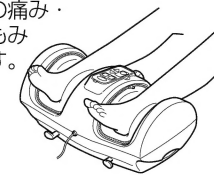

ふくらはぎ

床にすわった状態で、ふくらは
ぎをローラーの間に入れます。
ふくらはぎの血行を促進し、むく
み・だるさを和らげます。

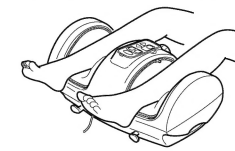

安全装置について

過大な負荷や長時間の連続使用により内部温度が上昇
した場合は、「ピー」と音が鳴り、安全装置が作動し
てローラーが停止します。この場合は電源スイッチを
切り、1時間程度の時間を置いて、本体内部の温度を
下げてからお使いください。


ご 注 意

- 使用中に気分が悪くなったり、身体
に異常を感じた時には、ただちに使
うのをやめ医師に相談してください。
- 1回のマッサージ時間は15分以内に
してください。


足幅調節ダイヤルの使いかた



自動コースの使いかた

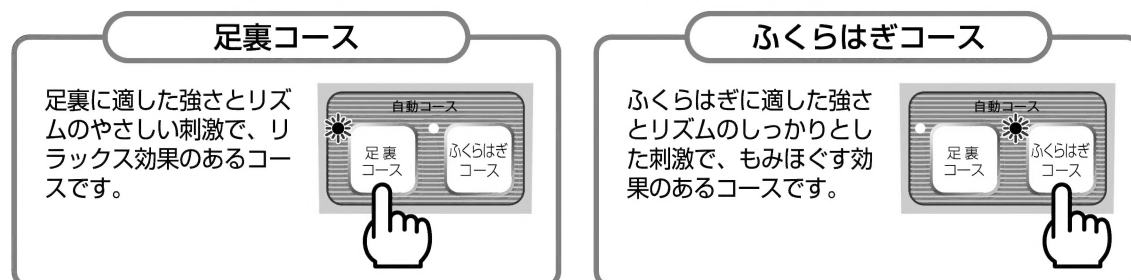

おこのみコースの使いかた

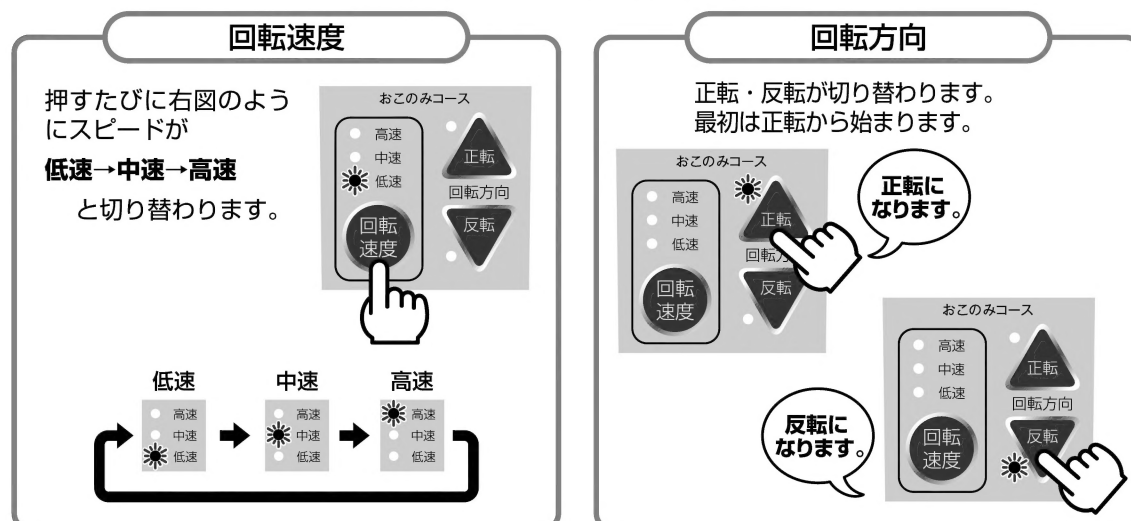


お手入れのしかた


必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

クッションカバーのお手入れ

- クッションカバーはブラシをかけて、やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤をふくませ、よくしぼってから拭き取ります。よごれがひどい場合は、本体から取り外し、必ずネットに入れて、洗濯機の弱水流で洗ってください。

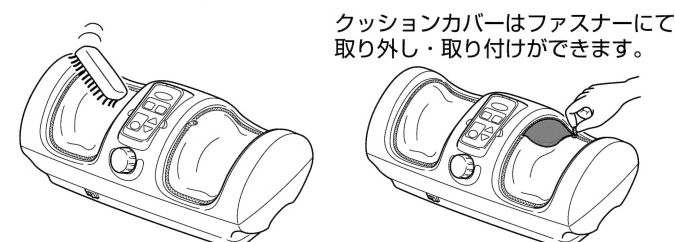


- クッションカバーには左右の区別（ファスナーの引手の有無）があります。取り付ける時は、左右を確認してください。（左右を間違えると取り付けできません。）
- ※クッションカバーの交換用をお求めの場合は、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）
- ※クッションカバーは必ず付属のもの、弊社TF170専用のクッションカバーを使用してください。

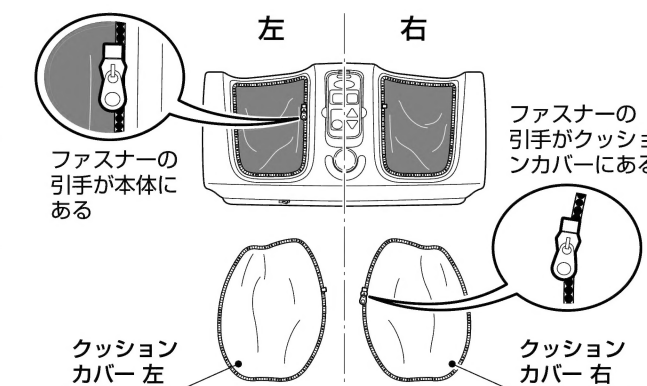


本体のお手入れ

- 乾いたやわらかい布で拭き取ります。よごれがひどい場合は、やわらかい布に水または水で薄めた中性洗剤をふくませ、よくしぼってから拭き取ります。

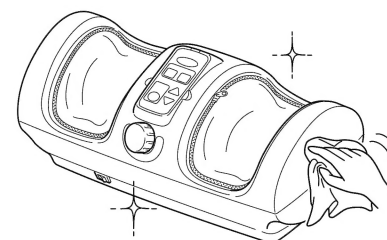

保管

- 必ず電源スイッチを切ってから電源コードを電源コード巻きに巻き付け、高温・多湿・直射日光の当たる場所やほこりの多い場所を避けて保管してください。

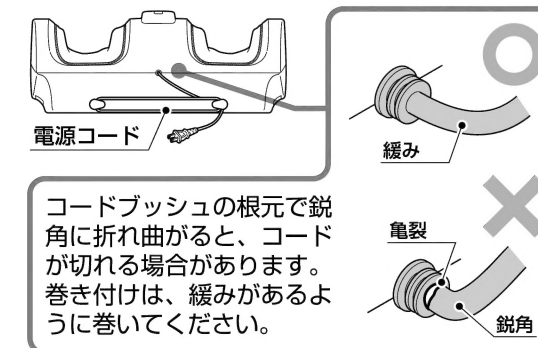

ご注意

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ベンジン、シンナーをよごれ落としとして使わないでください。
- 保管する時は、電源コードを電源コード巻きフック以外に巻き付けしないでください。
- 製品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けている。 ●電源スイッチが入っていない。 ●電源コードが断線している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを正しく接続する。 ●電源スイッチを入れる。 ●電源コードが断線している場合はただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。 ●電池を交換してください。
停止してしまった。	<ul style="list-style-type: none"> ●使い始めてから15分以上経っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●しばらく休ませてから、再度運転/停止スイッチを押す。
マッサージ中の音 <ul style="list-style-type: none"> ●クッションカバーのこすれる音 ●ローラーの回転音 ●正転・反転の動作音の違い ●負荷をかけた時の音 	<ul style="list-style-type: none"> ●構造上、音が出ることがある。 	<ul style="list-style-type: none"> ●機能に影響はありませんので、引き続きそのままお使いください。
クッションカバーが破れた。	ただちに使用を中止し、クッションカバーを交換してください。クッションカバーの交換用をお求めの場合は、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。	
保護カバーが破れた。 煙がでる。 コードがねじれて戻らなくなった。 破損した。	ただちに使用を中止してください。「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。	

仕様

品名	フットマッサージャー	一般的名称	家庭用電気マッサージ器
形名	TF170	医療機器製造販売業許可番号	20B2X10001
電源	AC100V 50-60Hz		
消費電力	45W	医療機器認証番号	220AKBZX00061000
定格時間	15分（タイマー）	材 質	本体/ABS クッションカバー/ネオプレンゴム
リモコン用電池	単4形乾電池×2		
重 量	7.5kg	コード長さ	1.8m
寸 法	高さ243×幅576×奥行き310（mm）		
ローラーの回転速度	30回転/分（低速） 45回転/分（中速） 60回転/分（高速）		
効果効能	疲労の回復 筋肉痛・神経痛の緩和 筋肉疲労をとる 血行の促進		



アフターサービスについて

1.保証書について ———— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870

FAX 0263-25-0808

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



『長年ご使用のフットマッサージャーの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コードに傷などがいないか、クッションカバーが破れていないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	フットマッサージャー	形 名	TF170	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		★お買い上げ年月日	年 月 日	
★ お 客 様	ご芳名		住所・店名		
	ご住所(〒)		★ 販 売 店		
	お電話		電話		

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市筑摩4-1-20